


# SCEMED

LA RÉFÉRENCE  
DU BIEN-ÊTRE MÉDICAL

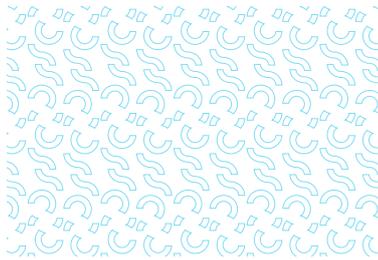

**RELAX** | HYGIÈNE  
& RELAXATION

# RELAX

## ERGONOMIQUE, INTUITIVE ET SÉCURISANTE

La baignoire RELAX a été pensée par nos ingénieurs pour une prise en charge simplifiée de vos patients et résidents. Elle répond à tous vos besoins de qualité, de sécurité et de confort de travail.



### Informations



Personnes autonomes  
à dépendantes

## Caractéristiques techniques



### TABLEAU DE COMMANDES À TOUCHES TACTILES

- Mitigeur thermo avec sécurité anti-brûlure.
- Fonction montée/descente et inclinaison.
- Affichage électronique de la température de remplissage.
- Système de désinfection contrôlée.
- Utilisation guidée par rétroéclairage des fonctionnalités disponibles.

## Informations techniques

<b>Réglage de la hauteur</b>	De 460 mm à 640 mm
<b>Charge maximale</b>	300 Kg
<b>Consommation d'eau (avec résident)</b>	200L
<b>Volume de pré-remplissage</b>	Pédiluve 90L
<b>Inclinaison</b>	0° à 20°
<b>Poids de la baignoire à vide</b>	150 Kg
<b>Matériaux</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cuve anatomique en fibre de verre renforcé</li><li>• Châssis en acier inoxydable laqué blanc</li></ul>
<b>Détails techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Robinetterie de marque GROHE</li><li>• Système anti-retour protégé par clapet anti-siphonage</li><li>• Sécurité anti-brûlure 42°</li></ul>
<b>Approvisionnement</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Eau chaude et froide : R raccord 15/21</li><li>• Manchon de raccordement pour l'évacuation : DN 50</li><li>• Alimentation électrique : 230 V / 10A - 50 Hz</li></ul>
<b>Batterie pour la descente d'urgence</b>	Batterie étanche sans entretien
<b>Normes</b>	Marquage CE selon la directive 93/42/CEE ISO 9001 (système de management de la qualité)

\* Ces options ne sont pas compatibles avec la chromothérapie ou la musicothérapie

## Options



Distributeur d'huile de bain et de shampoing\*



Assise ergonomique avec coussins de confort\*



Bonde de vidange avec trop plein et poignée de maintien

## PERSONNALISATION VISUELLE



Pour une ambiance démedicalisée, nous vous proposons d'apporter votre touche personnelle.

# Bien-être & détente

## BALNÉOTHÉRAPIE ET HYDROMASSAGE



**La baignoire RELAX offre un massage de tout le corps** par jets d'eau et d'air pour un moment de détente dans le calme absolu.

## LA CHROMOTHÉRAPIE

### INITIEZ-VOUS À LA CHROMOTHÉRAPIE !

Notre guide vous suggère des ambiances couleurs pour favoriser la détente, le lâcher-prise, la sérénité...

- Défilement de 256 couleurs.
- Projection dans l'espace bain.
- Programme individualisé grâce au blocage sur une couleur.

## LA MUSICOTHÉRAPIE

### PERSONNALISEZ L'ATMOSPHÈRE DE VOS SOINS !

Module vibratoire intégré dans la cuve qui prodigue un massage par ondes sonores. Offrant un moment de détente et d'harmonie pour le corps et l'esprit grâce aux vibrations des basses fréquences dans l'eau qui procurent un massage par ondes sonores et créent une atmosphère apaisante et une expérience unique.




### Les + produits

- Balnéothérapie silencieuse pour une détente complète.
  - Direction et intensité des jets réglables.
  - Système de balnéothérapie sans tuyauterie et désinfection contrôlée.
  - Temps d'efficacité du détergent garanti.

## CONCEPTEUR D'ESPACE DE SOINS

Notre bureau d'études est spécialisé dans la création d'ambiances bien-être. Avec notre accompagnement sur-mesure, vos espaces bain deviennent de véritables lieux de détente.

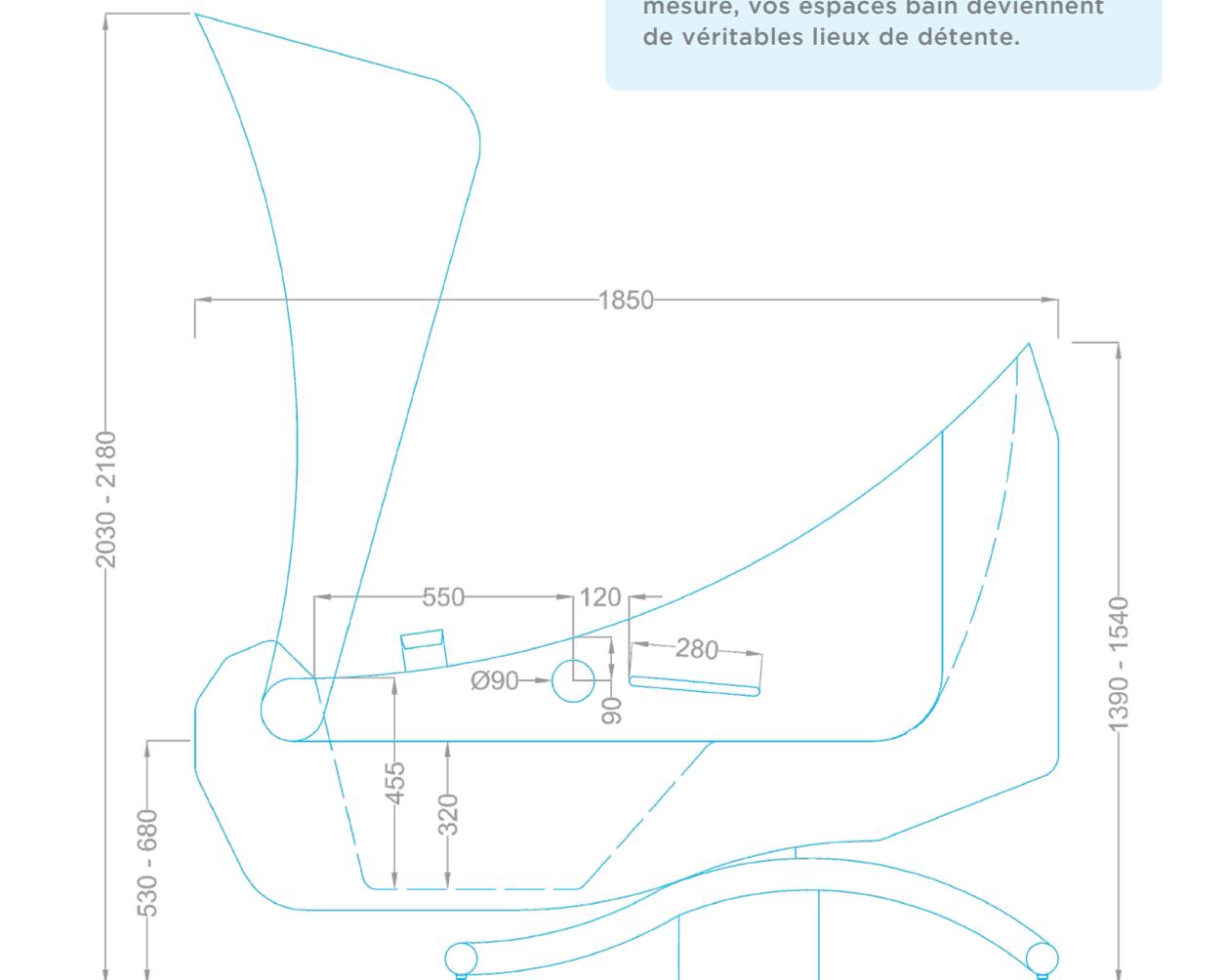

## INSTALLATION ET PROGRAMMATION

Notre technicien expert effectuera le placement et le raccordement de la baignoire ainsi que tous les tests de mise en service et la programmation des paramètres personnalisés. Il assurera également l'entretien annuel et la maintenance.



### Nos formateurs en thérapies naturelles

Sublimer les bienfaits de l'eau chaude pour éveiller, ressourcer ou faciliter l'endormissement. Nos formateurs vous transmettent leur savoir faire pour réaliser les soins sereinement.



### **FORMATION**

Transfert de notre savoir-faire pour la bonne utilisation des matériels SCEMED



### **CONSEILS PERSONNALISÉS**

Notre bureau d'études interne vous accompagne également dans vos projets d'aménagement sur mesure.



### **CONTRAT DE MAINTENANCE**

Pour plus de sérénité et de tranquillité, des offres adaptées et personnalisées selon vos besoins.

[Scemed.com](http://Scemed.com)



#### **LA RÉFÉRENCE DU BIEN-ÊTRE MÉDICAL**

SCEMED - Parc Eurasanté - Lille Métropole  
310 rue Jules Vallès - 59120 LOOS

**Tél. : 03 20 28 04 28**  
**Fax. : 03 20 28 04 00**  
**Email. : [contact@scemed.com](mailto:contact@scemed.com)**

Suivez nous sur :

